

Nebula spacer



Maschera buccale distanziatrice,
specifica per il trattamento delle
vie aeree inferiori

Nebula Spacer

Maschera buccale distanziatrice, specifica per il trattamento delle patologie delle vie aeree inferiori.

① Volumetria

La maggior volumetria della maschera buccale assicura la significativa riduzione della dispersione del farmaco nella fase espiratoria.

② Ergonomia

La particolare conformazione della maschera buccale è stata studiata per garantire la massima ergonomia ai pazienti sia adulti che pediatrici, massimizzando l'aderenza ed il confort durante la terapia.

③ Camera Distanziatrice Integrata


Il distanziatore aumenta il deposito bronchiale, intensificando così l'efficacia della terapia.

④ Valvola Unidirezionale

Durante l'espirazione occasionale con la bocca, la valvola unidirezionale consente una drastica riduzione della dispersione di farmaco.

NOVITÀ

La particolare conformazione di Nebula Spacer risulta perfettamente congeniale soprattutto ai pazienti pediatrici che mal sopportano il disagio causato da naso e bocca contemporaneamente coperti.

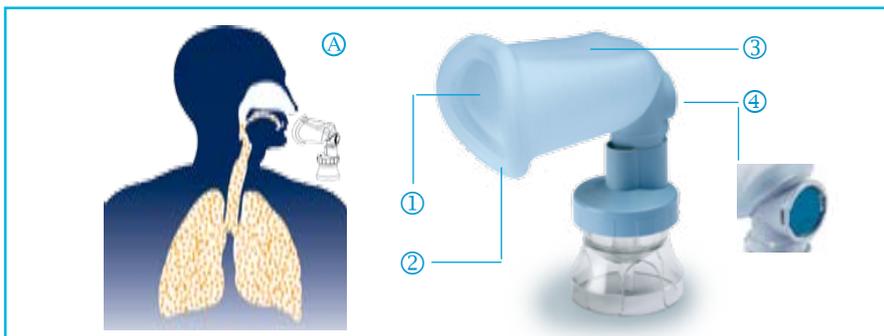

Sistema di funzionamento Nebula Spacer

INSPIRAZIONE

Caricamento.

La particolare conformazione di Nebula Spacer consente di decelerare la velocità delle particelle erogate, riducendo il deposito orofaringeo del farmaco.

ESPIRAZIONE

Attraverso le cavità nasali.

L'espirazione nasale evita la dispersione del farmaco, mentre il flusso continuo generato dall'apparecchio carica nuovamente la camera distanziatrice rendendo disponibile il farmaco per l'atto inspiratorio successivo.

Attivazione.

Con l'inspirazione il paziente ingloba le particelle di farmaco nel proprio flusso respiratorio e si ottiene in questo modo un aumento della deposizione periferica del nebulizzato.



Terapia più efficace in tempi brevissimi.

Ridotti tempi terapeutici.

Nebula Spacer è un sistema ad alta efficienza:

- riduce drasticamente la dispersione del farmaco;
- limita il deposito orofaringeo

- durante l'inspirazione;
- incrementa la deposizione periferica di farmaco.

Nebula Spacer è così in grado di garantire una terapia efficace in tempi brevissimi: 2 minuti favorendo la compliance del paziente e la sua accettabilità della terapia.

MARKOS MEFAR

Markos Mefar dal 1° giugno 2009 è diventata
Air Liquide Medical Systems S.p.A.

Numero Verde

800-170.009

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.
Via dei Prati 62 - 25073 Bovezzo (Brescia)
Tel. +39 030 20159.11
Fax +39 030 2000551

www.airliquidemedicalsystems.it

CE 0051 www.airliquidemedicalsystems.com

La Divisione Sanità del Gruppo Air Liquide fornisce gas e materiali medicali agli ospedali, servizi per le cure domiciliari dei pazienti e contribuisce a contrastare le infezioni ospedaliere. I suoi 7800 collaboratori forniscono 5000 ospedali e 300.000 pazienti nei 5 continenti. Air Liquide Medical Systems è parte della Divisione Sanità del Gruppo Air Liquide.