



Medline International Italy s.r.l.  
Unipersonale

Piazzale della resistenza, 3  
50018 Scandicci (FI)  
Tel. 055 / 776 6516

www.medline.eu/it



## Scheda Tecnica

## Umidificatori Aquapak® con adattatori

### Riferimento

Codice Articolo	Capacità	Configurazione	Valvola di sicurezza	Adattatore	Include	Unità/box
400340	340 mL	Sterile water	Yes	Internazionale	400040	20
400640	650 mL	Sterile water	Yes	Internazionale	400040	10
003-40F	340 mL	Sterile water	Yes	Francese	000-40F	20
006-40F	650 mL	Sterile water	Yes	Francese	000-40F	10

Bottiglia di acqua sterile, con adattatore. L'adattatore serve a connettere il flacone di acqua sterile alla fonte di ossigeno per consentirne l'umidificazione. Il collegamento tra l'adattatore e il flacone di umidificazione mantiene l'integrità del sistema chiuso durante la procedura.

**Caratteristiche dell'acqua sterile Aquapak:** Distillato, deionizzato, dechlorurato, doppio filtro tramite filtro Millipore, non pirogeno, standard di qualità USP.

**Metodo di sterilizzazione dell'acqua:** trattamento asettico (A)

**Adattatori Aquapak:** sono disponibili in 2 versioni e consentono il collegamento diretto al flussimetro:

- 9/16 pollici (internazionale)
- 12/125 pollici (francese)

**Metodo di sterilizzazione degli adattatori:** irradiazione (R)

### Descrizione

### Destinazione d'uso

Umidificazione dell'ossigenoterapia

### Materiali

**Serbatoio:**

**Flacone:** polipropilene

**Contenuto:** Acqua distillata, sterile, conforme a USP

**Perno di perforazione:** polimero a base acrilica o polistirolo

**Adattatore:** polipropilene

**Manicotto:** silicone

### Pack factor

Si prega di fare riferimento alla tabella

### Confezionamento

**Confezionamento adattatore:** Tyvek

**Confezione esterna:** Busta in polietilene (PE)

### Sterilizzazione



### Validità

48 mesi dalla data di produzione a confezione integra

### Presenza di lattice

Non contiene lattice


Data emissione:

01/02/2022

Revisione: 0

Approvato da: Resp. Qualità

Page 1/2

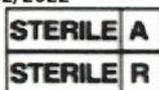

1639

© 2022 Medline Industries Inc. or one of its subsidiaries.  
All rights reserved.  
© TDS\_Aquapak Humidifiers with Adaptors\_EN01



<b>Conservazione e stoccaggio:</b>	Conservare a temperatura ambiente, lontano dall'esposizione diretta alla luce. Un'esposizione prolungata a luce fluorescente, luce del sole o calore danneggiano il dispositivo.
<b>Conformità normativa</b>	Conforme alla Direttiva sui Dispositivi Medici 93/42/CEE Dispositivo Medico Classe IIa sterile Fare riferimento all'etichettatura completa e alle istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto.
<b>Classificazione CND</b>	R060202
<b>RDM:</b>	58299
<b>Fabbricante</b>	Teleflex Medical, USA certificata EN ISO 13485
<b>Rappresentante Europeo (EC Rep)</b>	Teleflex Medical, Irlanda
<b>Distributore</b>	Medline International Italy srl Unip. certificata UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001

